

深紫外線照射器

キレイキープ ライト

キレイキープ Light

取扱説明書




警告

本製品は光源より深紫外線（UV-C）を照射します。目を損傷する恐れがあるため、照射光を直視しないでください。皮膚に照射光を当てないでください。

使用用途

本製品は、対象物（義歯、リテーナー、ナイトガードなど）の表面に対して「キレイキープ スプレー」の成分を化学反応させることを目的に使用する専用深紫外線照射器です。
本製品をご使用の際には、「キレイキープ スプレー」付属の取扱説明書をご確認ください。

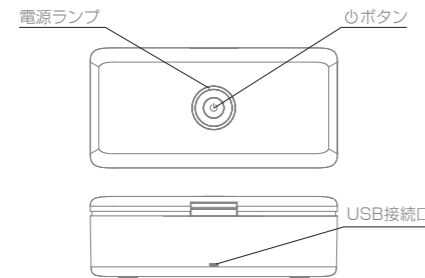

内容物

- ・ 本体
- ・ ACアダプター
- ・ 取扱説明書

操作方法および機能

1. 電源ON/OFF

ON：ACアダプターを接続すると自動で電源ONになり、電源ランプが点灯します。

OFF：⓪ボタンを3秒以上長押しで電源OFFになり、電源ランプが消灯します。

（電源OFF時は、⓪ボタンを3秒以上長押しでONになります。）

2. 本体動作

電源ONの状態では⓪ボタンを押すと光照射が開始され、3分後に自動で停止します。

※蓋を完全に閉めた状態で光照射を行ってください。

※光照射中に蓋を開けないでください。

※動作中は側面の窓越しに青い光が確認できます。青い光が確認できない場合は直ちに使用を中止してください。

3. センサー機能

内蔵の重力センサースイッチにより、光照射中に蓋が開くと自動で光照射が停止します。蓋を閉めると再度光照射が開始されます。

※本製品を磁石などの磁気が発生する物の近くに置くとセンサーが動かない可能性があるため、避けてください。

※センサーが作動しない場合は直ちに使用を中止してください。

製品仕様

製品名	キレイキープ ライト
入力電圧	10V≒700mA（専用アダプターで電源供給）
最大消費電力	8W
LED電球	8球
外寸	216x105x70mm
内寸	203.7x89.6x42.8mm
本体重量	420g
波長	260-280nm
使用環境温度	0～40℃
保管環境温度	-10～45℃

メンテナンス

- ・ 安全のため、お手入れの際はACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・ 本体および本体内部の汚れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。水分が付着しないように気をつけてください。
- ・ 研磨剤、漂白剤、アセトン、ベンジン、シンナー系溶剤などは使用しないでください。変形、キズ、故障などに繋がる恐れがあります。

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、下記注意事項を必ず守り、正しくお使いください。

誤った使い方をすると、本体故障、変色、ACアダプター故障、ケーブルの損傷の原因となり、また、火災や怪我につながる恐れがあります。

- ・ 本説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ・ 本説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
- ・ 本体に貼付しているラベル類は剥がさないでください。
- ・ 照射光を直視しないでください。
（動作中に側面の窓越しに見える青い光はUV-Cと共に照射される可視光であり、人体への悪影響はありません。）
- ・ 皮膚に照射光を当てないでください。
- ・ 子供に操作させないでください。また、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ ACアダプターは付属のもの以外は使用しないでください。
- ・ 長時間使用しない場合は、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・ ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- ・ ACアダプターを傷つける行為(ねじる、重量物を上に置くなど)をしないでください。コンセント接続部にほごりがたまった状態で使用しないでください。
- ・ ACアダプターの外装の変色、変形、異臭などの異常が発生したときは、直ちにコンセントから抜き、使用を中止してください。
- ・ ACアダプターを本製品以外の機器に使用しないでください。故障の恐れがあります。
- ・ 本体やACアダプターが破損、損傷している場合は使用しないでください。
- ・ 本製品は防水仕様ではありません。湿気、水気の多い場所での使用、保管は避けてください。また、水をかけたり、水につけたりしないでください。
- ・ 濡れた手で機器の取扱いやACアダプターの脱着をしないでください。
- ・ 本体を運ぶ際は、蓋を持って持ち上げないでください。
- ・ 本体およびACアダプターを改造、分解、修理しないでください。

故障や損傷が疑われる場合は、直ちに使用を中止し、サンメディカル株式会社にご連絡ください。

誤った操作（照射光の直視、皮膚への照射など）によって、眼や肌に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

保証規定

本説明書に基づいた正常な使用、保管状態で本製品が故障した場合、ご購入日より1年間、無償交換致します。

無償交換をお受けになる場合は、購入日および購入店名が記載されている納品書または領収書のコピーをご準備いただき、サンメディカル株式会社にご連絡ください。

保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

次のような場合は保証対象外となります。

- ・ 使用上の誤り、不当な修理、改造による故障および損傷
- ・ 購入日および購入店名が記載されている納品書または領収書のコピーをご提出いただけない場合
- ・ お買い上げ後の輸送、落下、水の侵入および圧迫などによる故障および損傷
- ・ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧など不慮の事故による故障および損傷
- ・ 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- ・ 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷（著しくゴミ、ほこりなどが付着している場合も同様とする）
- ・ 使用後の外表面および内表面のキズ、汚れなどの故障を伴わない場合
- ・ 本体に記載されたLOTナンバーが確認できない場合
- ・ 保証期間を超過した場合

※この保証規定は、上記の時期・条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。保証によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。



本 社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2

☎ 077(582)9980

☎ 0120-418-303 (FAX共通)
電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30

ホームページ <http://www.sunmedical.co.jp>