

M&C PRIMER



すべての修復物に使えるマルチプライマー 「M&Cプライマー™」

歯科セラミックス用接着材料

M&Cプライマー™

セット 標準価格 ¥8,800

【製品構成】

A液…1本 (5mL) / B液…1本 (5mL)

単品

A液 / B液 各5mL 標準価格 各¥4,500

適用対象物

インレー

金銀パラジウム合金
 セラミックス など

ブリッジ


金銀パラジウム合金
 ジルコニア など

クラウン

金銀パラジウム合金
 CAD/CAM冠 など

ポストコア


メタルコア
 レジンコア など

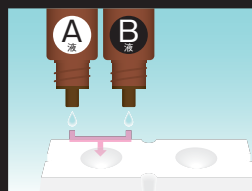

A液とB液を採取・混合



修復物に混合液を塗布

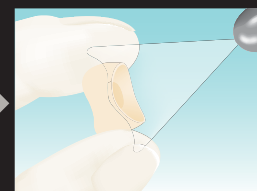

エアブロー

臨床例

「スーパーボンド®EX」でのCAD/CAM冠装着



残存歯質を「ティースプライマー」で前処理



CAD/CAM冠内面を「M&Cプライマー」で前処理



「スーパーボンドEX」の調製



「スーパーボンドEX」を移送



全周からセメントが流れ出ていることを確認して圧接



余剰セメントの除去




術後、頬側面観



術後、デンタルX線写真

「M&Cプライマー™」はすべての修復物に使えるマルチプライマー

● 修復物に対する引張接着強さ (サーマルサイクル10,000回後)

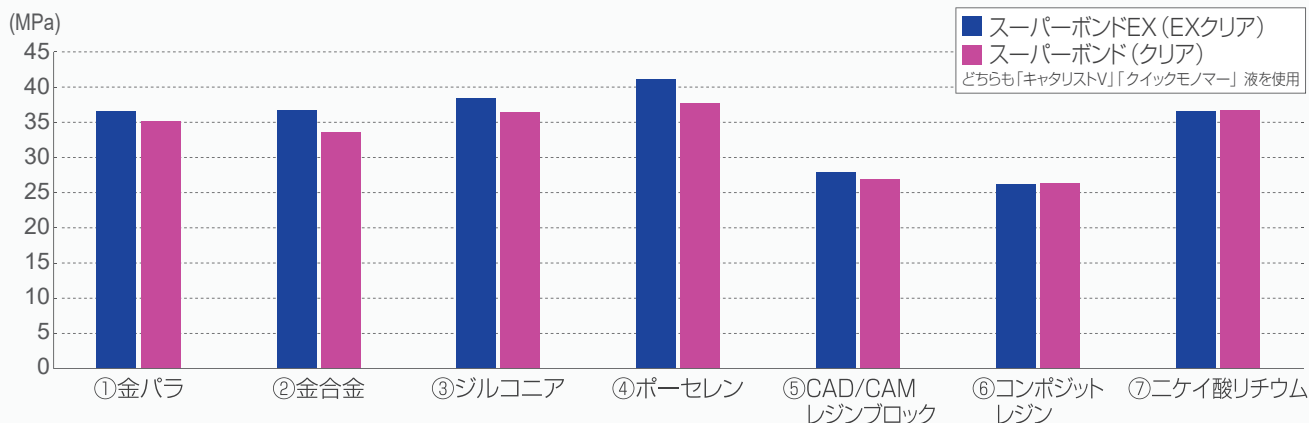

④⑦は#600研磨、①②③⑤⑥は#600研磨後サンドブラスト処理

「スーパーボンドEX」は処理後、「M&Cプライマー」を塗布し、乾燥。⑦のみ塗布30秒後、乾燥

「スーパーボンド」は処理後、①②は「V-プライマー」を塗布し、乾燥。③～⑦は「スーパーボンド PZプライマー」を塗布し、乾燥。

自社測定データ：条件により数値は異なります

操作方法 (セラミックス・レジン、金属など)

口腔内で試適をおこなった修復物は、あらかじめ「表面処理材レッド」または超音波洗浄器などで清掃してください。

ポーセレン、シリカ系ガラスセラミックス (ニッケイ酸リチウムなど)



すべての修復物に使えるマルチプライマー 「M&Cプライマー™」

適用対象物

インレー

金銀パラジウム合金
セラミックス など

クラウン

金銀パラジウム合金
CAD/CAM冠 など

ブリッジ

金銀パラジウム合金
ジルコニア など

ポストコア

メタルコア
レジンコア など

金属酸化系セラミックス、レジン系材料

(ジルコニア、アルミナなど)

(硬質レジン、ハイブリッドレジンなど)



金属 (貴金属合金、非貴金属合金)



■歯科接着用レジンセメント スーパーボンドEX (管理医療機器) 医療機器認証番号:303AKBZX000055000、■歯科接着用レジンセメント スーパーボンド (管理医療機器) 医療機器認証番号:221AABZX00115000、■歯面処理材 ティースプライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号:222AFBZX00100000、
■歯科セラミックス用接着材料 M&Cプライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号:231AFBZX00022000、■歯科用エッチング材 表面処理材レッド (管理医療機器) 医療機器認証番号:21600BZZ00068000、■歯科用エッチング材 表面処理材グリーン (管理医療機器) 医療機器認証番号:21600BZZ00069000、
■歯科セラミックス用接着材料 スーパーボンドPZプライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号:224AFBZX00102000、■歯科金属用接着材料 V-プライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号:20000BZZ00452000
■「スーパーボンド」はサンメディカル株式会社の登録商標です。 ■「M&Cプライマー」「キャタリストV」「ティースプライマー」「PZプライマー」「V-プライマー」はサンメディカル株式会社の商標です。
■ご使用に際しては、必ず添付文書をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2023年11月1日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■製造販売

サンメディカル株式会社

本 社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980

■発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 / 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 ☎06-6380-2525
お客様相談センター フリーコール 0800-222-8020 (医療従事者様専用)

東京本社 / 〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 ☎03-3834-6161

「M&Cプライマー™」の情報がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォン
からのアクセス
はコチラ→

