



歯科充填用コンポジットレジン
メタフィル® Flo
ミディアムフロー

標準価格 各色 ¥4,200

シェード 〈9色〉 A1、A2、A3、A3.5、B2、CV、
D-BROWN、OPAQUE、U-OPAQUE

商品構成	
シリンジ	1.5mL (2.6g)
20Gニードル	2本
23Gニードル	2本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
23Gニードルロング	1本




歯科充填用コンポジットレジン
メタフィル® Flo
ローフロー

標準価格 各色 ¥4,200

シェード 〈7色〉 A1、A2、A3、A3.5、B2、CV、D-BROWN

商品構成	
シリンジ	1.5mL (2.6g)
20Gニードル	5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)

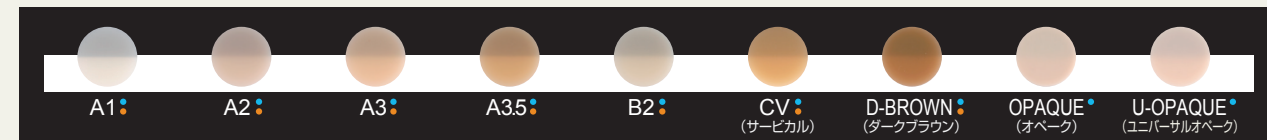

※色調は印刷のため実物とは異なります。

別売単品

20Gニードル
20本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
標準価格 ¥900

23Gニードル
20本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
標準価格 ¥900

23Gニードルロング
20本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
標準価格 ¥900

CV(サービカル)
歯頸部に適した色調です。
U-OPAQUE(ユニバーサルオパーク)
「OPAQUE」よりも歯冠色
に近い色調で、変色歯や
金属部分の遮蔽に適して
います。

関連製品



歯科用象牙質接着材
AQボンド™SP
AQボンド™SP 5.5mLセット
標準価格 ¥16,300

商品構成	
ボンド	5.5mL
キャタスポンジ	175粒
V型タッペン	5枚



歯科充填用コンポジットレジン
メタフィル®C

標準価格 各色 ¥3,650

シェード 〈10色〉 A1、A2、A3、A3.5、A4、B2、B3、C3、
INCISAL、DARK BROWN

商品構成	
シリンジ	2.5mL (3.5g)

歯科充填用コンポジットレジン メタフィル Flo (管理医療機器) 医療機器認証番号 222AFBZX00103000
歯科充填用コンポジットレジン メタフィルC (管理医療機器) 医療機器認証番号 22000BZX00779000 歯科用象牙質接着材 AQボンドSP (管理医療機器) 医療機器認証番号 219AABZX00122000

■「メタフィル」はサンメディカル株式会社の登録商標です。 ■「AQボンド」はサンメディカル株式会社の商標です。
■に使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2023年11月現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **サンメディカル株式会社**

本 社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 TEL 077-582-9980
<https://www.sunmedical.co.jp>

販売元 **株式会社 ニッシン**

〒601-8469 京都市南区唐橋平垣町8
<https://www.nissin-dental.jp>

歯科充填用コンポジットレジン
メタフィル® Flo

歯科充填用コンポジットレジン

Metafil Flo

メタフィル® Flo



Medium-Flow


Low-Flow

選べる流動性で幅広い症例に適用できる「メタフィル® Flo」


選べる流動性

当社のフィラー技術により2種類の流動性を実現しました。
症例によって2種類を使い分けることにより、築盛から充填、裏層まで様々な症例にご使用いただけます。

Medium-Flow ミディアムフロー

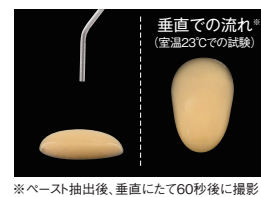

ローフロー Low-Flow

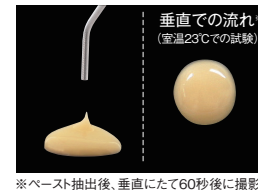

選べるニードル

これまでのニードル「20Gニードル」はもちろんのこと、更にゲージの細い「23Gニードル」及び「23Gニードルロング」を採用することにより、MI窩洞や狭くて充填しにくい窩洞でも簡単に充填作業ができ、レジンを無駄なくご使用いただけます。



識別用の青リング付き

20Gニードル



23Gニードル



23Gニードルロング



大きい窩洞の充填や窩底部の裏層、広範囲に塗り広げる症例などにおすすめ!



ゲージが細いのでMI窩洞におすすめ!



最後臼歯の遠心部や咬合面におすすめ!




使い易い切れの良さ



充填時のペーストの切れが良く、充填量をコントロールしやすいシリンジ設計です。
また、充填後の残圧により余分なペーストが出ないので、ストレスなくご使用いただけます。

機械的強度

前歯部のみならず、臼歯部での咬合圧に耐える強度を有しています。
また適度なX線造影性を有しているので、予後の診断や経過観察が可能です。

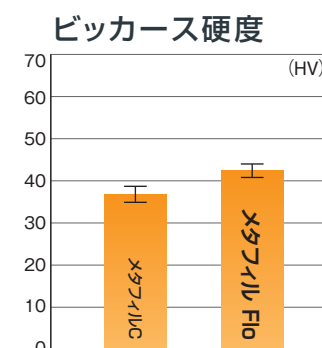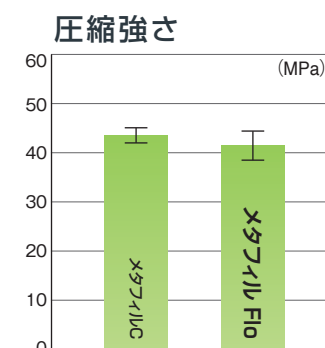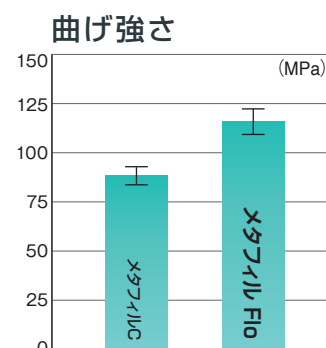

臼歯部に適用可能



前・臼歯部対応なので、幅広い症例に適用できます。

隣接部の充填

「ミディアムフロー」と「23Gニードル」を用いることで隣接部でも容易にアクセスできます。



術前



ボンディング処理後、「ミディアムフロー A2」充填



形態修正・研磨

乳歯の治療

「ミディアムフロー」と「23Gニードル」を用いることで小さい窩洞でもストレスなく充填できます。



術前



ボンディング処理後、「ミディアムフロー A2」充填



形態修正・研磨

歯頸部の治療

「ローフロー」を用いることで思い通りの付形が可能です。



術前



ボンディング処理後、「ローフロー A3」充填



形態修正・研磨

隔壁付与

根管治療時の防湿を目的とした隔壁付与の症例です。
「U-OPAQUE」を用いることで、後の形成時に歯質との境界が明確になります。



術前



ボンディング処理後、「ミディアムフロー U-OPAQUE」さらに、「ローフロー A2」で築盛



形態修正